

**ANTES DEL USO LEA CON ATENCIÓN ESTE
MANUAL**

MANUAL DE USO DEL ZAPPER.MX

REV. 3

www.zapper.mx

WhatsApp +52 833-389 -4054



ISBN: 9798434739719



Zapper.MX con batería



Zapper.MX con Fuente

Índice

HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD EN	
1.....	MEDICINA
3.....	EL ZAPPER
4.....	EFFECTOS DE LOS PARÁSITOS EN EL ORGANISMO
6.....	REFERENCIAS
6.....	MUCHO MÁS QUE UN ZAPPER
7.....	FUNCIONAMIENTO
8...	EL PRINCIPIO BÁSICO DE LAS MICROCORRIENTES
9.....	TRATAMIENTO CON FRECUENCIAS
¿CÓMO TRABAJAN LAS FRECUENCIAS MÚLTIPLES?	
10.....	
10.....	REFERENCIAS:
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL ZAPPER.MX	
11.....	
12.....	CONTENIDO DE LA CAJA
13.....	INSTRUCCIONES DE USO
13.....	¿CÓMO ENCENDER O APAGAR EL EQUIPO?
13.....	NIVEL DE LA BATERÍA
14..	QUÉ FRECUENCIAS INCLUYE MI EQUIPO ZAPPER
¿CÓMO SELECCIONAR UN TRATAMIENTO DEL	
14.....	ZAPPER?
16.....	¿CÓMO APLICAR UN TRATAMIENTO?
18.....	ANTENA ZAPPER TIPO DIPOLO
18.....	CÓMO SE CONECTA
19.....	EJEMPLOS DE USO CON ANTENA ZAPPER

19.....	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
20.....	RESULTADOS
20.....	RECOMENDACIONES
22.....	SEGURIDAD
23.....	PREGUNTAS FRECUENTES

ZAPPER.MX

El objetivo del ZAPPER.MX es el de ayudar en tratamientos, investigación y laboratorio, destrucción experimental de bacterias y otros patógenos.

El uso de este aparato para terapias se realizará bajo responsabilidad propia. El fabricante y el distribuidor no asumen responsabilidad alguna en el caso de otro uso que el determinado por el fabricante.

Nikola Tesla: *“Si quieres entender el Universo, piensa en Términos de Frecuencia, Energía y Vibraciones”*

Historia de la Electricidad en Medicina

La electricidad es la chispa de la vida, su fundamento. Hace miles de años que se conoce la naturaleza eléctrica del cuerpo; por ejemplo, la medicina china admite que todas las enfermedades tienen su origen en bloqueos energéticos que ocurren en el cuerpo. Es bien conocido que tanto el cerebro como el corazón funcionan por impulsos eléctricos, que pueden medirse en encefalogramas y electrocardiogramas. Y es que el funcionamiento del organismo en su conjunto se basa en la electricidad. De hecho, el medio de comunicación más rápido que tienen las células, muy por encima de las reacciones bioquímicas, son los impulsos electromagnéticos. Incluso los leucocitos, matan bacterias y hongos patógenos electrocutándolos.

El uso de la electricidad en medicina se remonta a la época romana, donde el médico Scribonius Largus en el 46 A.C. curaba el dolor de cabeza y la gota de sus pacientes ayudándose de un pez que emitía descargas eléctricas. Los peces eléctricos como la anguila se han venido utilizando de forma intermitente en medicina hasta el año 1745, en el que fueron sustituidos por electricidad artificial, la cual permitía controlar la intensidad de forma más precisa. En el siglo XIX la bioelectricidad (electricidad de baja intensidad aplicada al organismo) era un tratamiento rutinario en medicina, hasta que en el siglo XX la industria farmacéutica eliminó de un plumazo todas las terapias que no se apoyaban en el uso de medicamentos. Sin embargo, la aplicación de microcorrientes se siguió utilizando hasta la actualidad en la industria alimentaria para destruir patógenos, dado que las grandes multinacio-

nales farmacéuticas no se veían amenazadas por este sector.

El conocido ingeniero electrónico de origen ruso Georges Lakhovsky inventó en 1935 un oscilador de onda múltiple con el que eliminó numerosas patologías en humanos, animales e incluso plantas. En los años 60 el físico Robert Beck retomó el trabajo de Lakhovsky, que culminó con la creación de un pequeño dispositivo que emitía microcorrientes. Según Beck, el rango de frecuencias de múltiples longitudes de onda de su dispositivo permite que cada célula encuentre su única frecuencia resonante, y se regenere al absorber energía de la longitud de onda que le es propia.

Independientemente de Lakhovsky, en EE.UU. el Dr. Raymond Rife inventó un dispositivo bio-eléctrico que fue empleado en varias clínicas en el tratamiento de pacientes terminales de cáncer de 1934 a 1938, año en que llegó a oídos de la Asociación Médica Americana, la cual destrozó el programa por entero en seis meses y llevó a Rife a juicio.

Otro dato curioso es que la aplicación de microcorrientes se lleva usando mucho tiempo en el caso de mordeduras de serpiente, puesto que la electricidad neutraliza instantáneamente la toxicidad del veneno. Más recientemente, las investigaciones realizadas in vitro en 1990 en el Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York reportaron que el uso de microcorrientes inhabilitaba una enzima crucial para la reproducción del virus del SIDA. Por supuesto, los medios de comunicación no se hicieron eco de este descubrimiento susceptible de salvar la vida de miles de personas a un coste prácticamente despreciable. Se ha comprobado que la electricidad promueve la curación de fracturas en los huesos y estimula su crecimiento.

Hace poco tiempo apareció un artículo en la prestigiosa revista "Physics Today" que explicaba como campos eléctricos de baja intensidad ralentizaban el crecimiento de ciertos cánceres. Se constató que campos eléctricos, lo suficientemente pequeños para no provocar aumento de temperatura, pueden inhibir la progresión del cáncer debido a factores que conciernen la división celular.

El zapper

Originalmente, la Dra. Hulda Clark ideó el Zapper, un sencillo dispositivo electrónico que transformaba la corriente continua de una pila en corrientes pulsadas de menos voltios, pero de muy alta frecuencia. Descubrió que todos los seres vivos emiten una determinada frecuencia y, en general, cuanto más primitivo es el organismo, más baja es su frecuencia; cuanto más evolucionado el organismo, mayor será ésta. La frecuencia humana oscila entre 1520 y 9460 kHz, mientras que la frecuencia de los patógenos (hongos, virus, bacterias, parásitos, etc.) varía entre 77 y 500 kHz. Al tratar a los patógenos vivos dentro de nuestro organismo con la frecuencia correspondiente a su espectro, mueren a los pocos minutos. Afortunadamente, la corriente de baja intensidad emitida por el zapper ataca a los microorganismos sin afectar a las células del organismo.

En palabras de la Dra. Clark: *"No importa lo larga y confusa que sea la lista de síntomas de una persona, desde fatiga crónica o infertilidad hasta problemas mentales, en todos los casos tienen en su cuerpos tóxicos y/o parásitos. Nunca he encontrado que la falta de ejercicio, deficiencias vitamínicas, niveles hormonales o cualquier otro factor, sea una causa*

primaria o un elemento determinante de la enfermedad. Así que la solución para gozar de buena salud es obvia."

Por lo general, existe la creencia de que los parásitos son un problema del tercer mundo que no nos afecta. Sin embargo, por los cuatro litros de sangre del adulto medio circulan trillones de patógenos hostiles, que se distribuyen hacia los órganos y tejidos del cuerpo. El 50% de las autopsias de cadáveres realizadas en EE.UU. detectan la presencia de parásitos.

Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan parasitados. Esto se debe a la cantidad de toxinas medioambientales, contaminantes, sustancias químicas y metales pesados que debilitan nuestro sistema inmunológico, abriendo la puerta a toda clase de parásitos y otros microorganismos patógenos como bacterias y virus. Los parásitos a su vez producen sustancias tóxicas que debilitan aún más el sistema inmunológico. Este círculo vicioso es la causa principal de la mayoría de las enfermedades autoinmunes que nos asolan (como diabetes, artritis, Alzheimer, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple y enfermedad de Crohn entre otras), a pesar de los constantes avances tecnológicos y médicos.

Efectos de los parásitos en el organismo

- Producen tóxicos como sustancias de deshecho de su metabolismo. Una de dichas sustancias es el amoníaco, especialmente tóxico para el cerebro y que puede provocar insomnio.
- Provocan alteraciones cromosómicas al destruir el material genético del ADN.
- Destruyen células y órganos: plasmodium, onchocerca, anquilostoma.

- Albergan en su interior virus, bacterias y hongos. Los oncovirus que provocan cáncer también entran al cuerpo a través de parásitos. Los oncovirus, al igual que ciertos parásitos, reducen la apoptosis de las células cancerígenas (proceso natural de muerte programada), lo que aumenta la vida del tumor.
- Consumen los nutrientes del cuerpo. Por ejemplo, el áscaris consume vitamina B12 y vuelve inutilizable la vitamina C. Plasmodium, el parásito de la malaria, que presente en la mayoría de los pacientes con cáncer y SIDA, consume el hierro de los glóbulos rojos.
- Estimulan el crecimiento de tumores. Por ejemplo, la OMS califica al pequeño parásito hepático (*dicrocoelium dendriticulum*) como carcinogénico.
- Causan infecciones bacterianas, virales y amebiasis.
- Debilitan enormemente el sistema inmunológico.
- Los parásitos son capaces de inducir cambios en el comportamiento. Por ejemplo, el toxoplasma es un parásito que se aloja en el cerebro de las ratas y les reduce el miedo a los gatos, lo que afecta negativamente a su tasa de supervivencia. En humanos, se atribuye la esquizofrenia a las mico-toxinas producidas por distintos tipos de mohos (hongos). Otro ejemplo es la bacteria *Shigella*, que produce toxinas que se instalan en el cerebro y en el sistema nervioso, provocando depresión, ira e irritabilidad.

Referencias

-Medalab Technologies, www.medalab.com, "Manual de Uso BIOTROHN®"

-Dra. Hulda Clark: "La Curación es posible", "The Cure for all Cancers", "The Cure for all Advanced Cancers", "The Prevention for all Cancers", "La Cura y Prevención de Todos los Cánceres" (su último libro publicado en 2008) y "The Cure for HIV and AIDS"

-Alan E. Baklayan: "Parasites - the hidden cause of many diseases"

-Becker & Selden. "The Body Electric. Electromagnetism and the Foundation of Life"

-Denie Hiestand. "Electrical Nutrition"

-Ann Louise Gittleman. "Guess What Came to Dinner?: Parasites and Your Health"

-Hanna Kroeger. "Parasites. The enemy within"

Mucho más que un Zapper

Con el Zapper.MX no hay necesidad de saber programar, ya que viene con las frecuencias incorporadas en el equipo.

Además, las constantes variaciones de frecuencias del Zapper.MX consiguen eliminar continuamente los patógenos. Esta característica consigue tratar el problema de las resistencias adaptativas de bacterias o virus mediante cambios de frecuencia resonantes.

Varias investigaciones han demostrado que este cambio de frecuencia es necesario en estos dispositivos cuando se utilizan durante más de 10 o 20 minutos hasta una hora. Una frecuencia constante es menos eficaz, ya que hay una nivelación de las reacciones electroquímicas y hay microorganismos que se adaptan rápidamente a la frecuencia estable.

Funcionamiento

Como ya sabemos, además de materia somos también electricidad. Cada entidad tiene su propia frecuencia, y varía en función de si es una célula sana, un patógeno o una célula enferma. A grandes rasgos, el Zapper.MX trabaja liberando los electrones desde los electrodos, que viajan a través del cuerpo e inactivan los patógenos y toxinas que encuentran a su paso. Hablando de electricidad en términos generales, los parásitos y los tejidos enfermos tienen carga positiva (=escasez de electrones). El Zapper.MX introduce electrones, con carga negativa, a través de la piel hacia los tejidos vivos del cuerpo causando la muerte de los parásitos mediante la inversión de la polaridad. También ayudan a sanar el tejido enfermo, ya que el tejido sano está cargado negativamente.

Por eso, el Zapper.MX también resulta efectivo en el tratamiento del dolor. El dolor implica una acumulación de hidrógeno (iones positivos, H+) en la zona, que cursa con inflamación. La bioelectricidad provee de iones negativos (electrones) para contrarrestar los iones positivos del hidrógeno. Siempre que hay dolor, inflamación o enfermedad en una zona, los niveles de carga eléctrica son bajos. El Zapper.MX también restablece los niveles saludables de carga eléctrica de la célula: alrededor de 100 milivoltios (mV). Tengamos en cuenta que una célula envejecida tiene 50 mV de carga, y una célula cancerígena 15 mV.

Por otro lado, los electrones que aporta la corriente eléctrica del Zapper.MX ayudan a aumentar la polaridad de la linfa, haciendo que fluya mejor por todo el cuerpo. Esto es importante porque la linfa circula mucho más despacio que la sangre, al no tener un órgano que la impulse como en el caso del corazón. Las células dependen del sistema linfático para recibir

oxígeno y agua, así como para eliminar las sustancias de deshecho que producen.

Las microcorrientes también recargan los niveles de energía a nivel intracelular incrementando la producción de ATP en las mitocondrias en un 500% y la absorción de proteínas de la célula entre un 40% y un 50%. Por eso, muchos pacientes con el síndrome de fatiga crónica han incrementado considerablemente sus niveles de energía.

El principio básico de las microcorrientes

¿Qué son las microcorrientes?

Las microcorrientes consisten en tensión eléctrica con un voltaje determinado: Existe un amplio consenso a la hora de afirmar que la mentalidad humana se caracteriza por creer que “cuanto más mejor”. En Biología, esta idea tiene muy poca validez y en muchas ocasiones el efecto suele ser más bien el contrario. Pensemos, por ejemplo, en la distribución de las hormonas: la cantidad adecuada (pequeña) tiene una importancia vital. Un exceso puede tener consecuencias catastróficas. El naturópata profesional A. E. Baklayan observó una y otra vez durante la realización de pruebas bioenergéticas que los programas compatibles, es decir, los llamados “programas de bienestar con vibraciones armónicas”, que emiten voltajes extremadamente bajos, evidenciaron los mejores resultados. En este caso, menos siempre solía ser más. A partir de entonces, utilizó sistemáticamente estas tensiones bajas y comprobó que sus pacientes notaban un efecto mucho más intenso de lo habitual.

La ley Arndt-Schultz establece que la estimulación suave aumenta la actividad fisiológica y la estimulación muy fuerte reprime o destruye la actividad.

Las microcorrientes son, por tanto, corrientes eléctricas de baja intensidad que se asemejan a la corriente natural del propio cuerpo.

La corriente eléctrica empleada en la terapia con frecuencias variables de microcorrientes es considerablemente inferior que en cualquier clase previa de electroterapia, usando la resonancia como factor principal, siendo esa la clave de su efectividad.

Se ha logrado alcanzar una compatibilidad biológica con estas frecuencias de corrientes débiles para emular el funcionamiento normal del cuerpo, de manera que se desencadene y se mejore la respuesta de reparación en los tejidos. Se restauran los impulsos eléctricos comunes de las células, en consecuencia, el dolor se calma y comienza la reparación.

El uso previsto para las microcorrientes como apoyo en tratamientos terapéuticos es permitir que el usuario tenga una herramienta más potente y eficaz, que le ayude en la batalla contra la enfermedad y el envejecimiento.

Tratamiento con frecuencias

La mayoría de las aplicaciones con microcorrientes y sus resultados, ya sean médicos o estéticos, se basan en los mismos mecanismos de acción, entre los que se encuentran:

- Aumento de los beneficios circulatorios: linfáticos y sanguíneos
- Reeducación muscular
- Iontoforesis: Se basa en introducir iones a través de la piel a los tejidos mediante dos electrodos. Las microcorrientes incrementan la penetración a través de la resonancia que se genera

- Aumento de la producción natural de colágeno y elastina
- Dispersión de colágeno endurecido
- Estimulación de la degradación enzimática involucrada en los mecanismos bioquímicos inflamatorios
- Potenciación de los efectos acumulativos de reparación y regeneración
- Se logra electroanalgesia entre 5 a 8 minutos de aplicación
- Aumento de la síntesis de proteínas, gluconeogénesis y transporte a través de las membranas celulares
- Incremento de la actividad mitocondrial: generación de ATP
- Favorece la eliminación de sustancias de desecho del organismo

¿Cómo trabajan las frecuencias múltiples?

Para entender qué ocurre a nivel físico, es necesario hacer una introducción de lo que sucede a nivel bioquímico. Las moléculas que componen las células, están compuestas por átomos que a su vez tienen unos electrones que vibran en determinadas frecuencias. La característica vibratoria de cada átomo pasa a cada molécula, que compone cada célula hasta llegar a cada tipo de tejido.

Entonces, cada patógeno posee así sus frecuencias específicas -patogénicas- que al entrar en resonancia con las frecuencias variables del zapper, se satura y muere.

Referencias:

-Tuen Muen Hospital 1988, Kaada 1982-83, Debricini 1995, Cheng 1982, Chi 1999

-Cheng 1982 ATP, Clin. Orthop. 171, Nov-Dec. 1982, pág. 264 a 271 Chi/University of Washington 1999

Parámetros técnicos del Zapper.MX

- Múltiples Frecuencias
- Alta Precisión, mejor al 5%
- Portátil cuando se usa con batería
- Accesorio Antena Tipo Dipolo que es Comprobador del Zapper.MX
- Protección de cortocircuito e inversión de polaridad
- Microprocesador de alto rendimiento con Oscilador de Cuarzo de Alta Precisión
- Sonido de señalización para indicar cambio o Fin de un Tratamiento
- Electrodo fabricados con Recubrimiento de Oro para evitar el cobre por su oxidación o el aluminio y el acero por contener trazas de metales pesados contaminantes
- Adaptador externo de red, entrada 100-240 VAC.
- Visualización de nivel de voltaje de entrada al encender el equipo con los 7 LEDs del panel
- Sencillo display de 7 LEDs y un único botón para encender, apagar o cambiar de tratamiento

Contenido de la Caja

Al adquirir uno de nuestros equipos, usted recibirá al menos:

- Un generador Zapper.MX
- Una tabla con las frecuencias calibradas en su Zapper.MX
- Electrodos de Oro con Cable de Conexión Directa para conectar al Zapper.MX
- Una copia de este manual
- Fuente de Alimentación externa
- Una antena Tipo Dipolo con Emisor de Luz
- Cable adaptador para conectar batería externa

Instrucciones de Uso

¿Cómo encender o apagar el equipo?

Conecte la fuente o la batería con el cable adaptador. Para encender el equipo pulse el botón “Selector ON/OFF” durante 4 segundos. (Los primeros 2 segundos se mostrará el nivel de la Batería o Fuente) Y para apagar presione el mismo botón por 4 segundos seguidos.


Nivel de la Batería

Con el equipo apagado, si presiona el botón de encendido, durante 2 segundos el display de 7 LEDs mostrará el nivel de batería o de fuente externa.

- 7 LEDs encendidos: BATERÍA LLENA
- 4 LEDs encendidos: BATERÍA A MEDIA CARGA pero aún utilizable
- 2 LEDs encendidos: BATERIA MUY BAJA, se debe cambiar o usar la fuente externa.

Qué frecuencias incluye mi equipo Zapper

Las frecuencias calibradas en su Zapper.MX se le envían impresas aparte. Cada zapper puede tener distintos tratamientos, se recomienda guardar su lista de frecuencias en un lugar seguro.

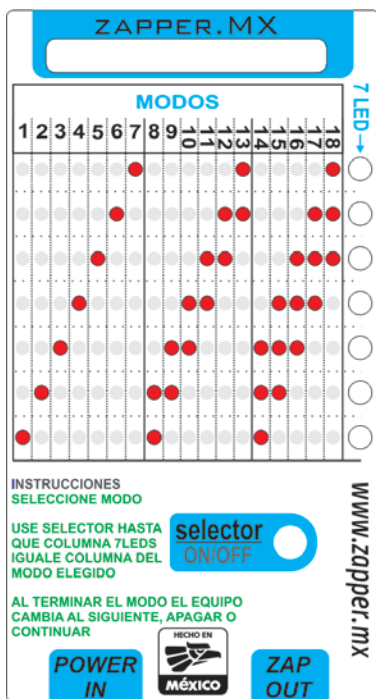

¿Cómo seleccionar un tratamiento del zapper?

Primero mire la lista de tratamientos que viene con su zapper. Verá que esta tiene 18 modos. Cada modo puede tener una o mu-

chas frecuencias, con un tiempo de duración cada una, que se indica en la columna “duración” de la lista.

Después que decida cuál tratamiento de la lista va a trabajar, encienda su equipo. Inicia en el modo UNO automáticamente. Pero Pulse el botón selector para ir a otro Modo. En cada toque del botón se avanza un Modo.

Si acaba de encender su zapper, siempre empieza en el modo M1, por lo que si pulsa el botón pasará al modo M2, y así sucesivamente hasta el modo M18.

Estando en el último modo M18, si pulsa el Selector, pasará al Modo primero M1.

Todos los modos no tienen necesariamente la misma duración, porque cada modo puede tener distinta cantidad de frecuencias. Su Zapper.MX le avisará que terminó un tratamiento o modo emitiendo un sonido corto.

Al terminar un Modo su zapper suena la alarma corta y cambia al siguiente Modo. Si no requiere algún modo sáltelo presionando el botón Selector o termine la sesión Zapper. Entonces, para cambiar de modo, solo debe presionar el botón pulsador.

Su equipo tiene 7 LEDs. Estos LEDs indican cuál modo está trabajando. Por ejemplo, en el modo M1 de la lista, parpadea solo el primer LED de los siete.

Modo	LEDs que encenderán
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	1 y 2
9	2 y 3
10	3 y 4
11	4 y 5
12	5 y 6
13	6 y 7
14	1, 2 y 3
15	2, 3 y 4
16	3, 4 y 5
17	4, 5 y 6
18	5, 6 y 7

La siguiente tabla le muestra cuáles LEDs parpadean en cada tratamiento o modo.

En la caratula del equipo podrá ver varias columnas con puntos rojos y puntos grises que representan la misma tabla anterior. Un punto rojo significa un LED encendido, un punto gris claro indica LED apagado.

¿Cómo aplicar un tratamiento?

El protocolo de aplicación multifrecuencia consiste principalmente en sostener los electrodos o las pulseiras con las manos. También se pueden usar en la planta de los pies. El tiempo de aplicación dependerá de cada modo y se realiza automáticamente.


1. Conecte los Electroodos



2. Conecte la pila externa o la fuente, se enciende el equipo cuando es energizado, y sino enciéndalo pulsando el botón selector



3. Seleccione el tratamiento que desea aplicar con el botón selector
4. Sujete los electrodos, uno en cada mano o entre los pies o en la zona del dolor (no es importante la polaridad, pero use aquella que le brinde mejores sensación de resonancia, ver siguiente figura con opciones de conexión al cuerpo)

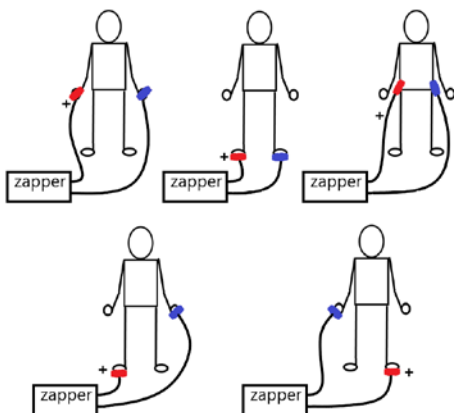

5. Espere la terminación del modo o los modos que desea aplicar, el equipo avisa emitiendo un sonido corto
6. Apague el equipo presionando el botón Selector durante 4s
7. Limpie los electrodos para el próximo uso con servitoalla de papel ligeramente húmeda en alcohol. No use estropajo con los electrodos de oro para evitar rayar la superficie dorada.

Algunos usuarios emplean Pads de Gel en lugar de los electrodos. Pero los Pads limitan la intensidad de la corriente 10 mil veces más que los electrodos de oro o cobre. Por tanto, no son recomendables para Zapper. Pero sí pueden ser útiles para aplicar en zonas muy sensibles como en el rostro o en zonas donde la piel sea muy fina.


Antena Zapper Tipo Dipolo

La antena tipo Dipolo para Zapper sirve para comprobar el funcionamiento del Zapper y/o para convertir las frecuencias de microcorrientes a pulsaciones ópticas.

Cómo se Conecta

Después de encender el Zapper y conectarle los electrodos haga lo siguiente:

1. Ponga los electrodos una superficie plana como se muestra en la siguiente figura
2. Ponga sobre el electrodo positivo el Positivo de la Antena y sobre el Negativo el Negativo de la Antena
3. Con pinzas para ropa o clic de papeles, puede fijar la posición de la antena contra los electrodos, ver siguiente figura

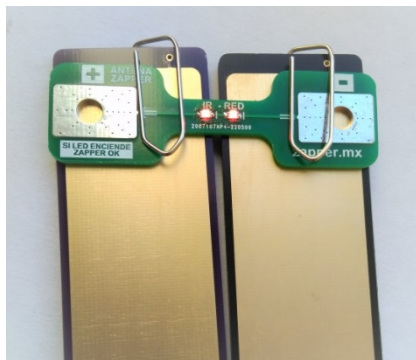

4. Seleccione una frecuencia o Modo de su zapper para obtenerlo en forma de pulsos ópticos

La emisión de Luz de la antena es prueba de que su zapper está trabajando bien.

Con su Zapper.MX se envía una Antena con Luz Roja. Pero como accesorio aparte, también contamos con Antena de Luz Transmutadora.

Ejemplos de uso con Antena Zapper

-Con luz Roja aplíquela sobre los ojos cerrados de 2 a 3 minutos cada mañana para Mejorar la Vista Cansada.

-Con luz Violeta, puede emplearla para meditación o como apoyo en los procesos de transmutación.

-Con luz roja o Violeta, con la frecuencia Schumann para sintonizar las energías de la habitación y mejorar sueño, concentración y procesos cognitivos

Resolución de Problemas

Si la antena no enciende, verifique lo siguiente:

1. Que los electrodos estén limpios
2. Que la antena toca los electrodos, positivo con positivo y negativo con negativo
3. Que los electrodos están sobre una superficie plana o que estén bien sujetos
4. Que el conector de los electrodos esté correctamente insertado

Para limpiar los electrodos puede emplear una servilleta o paño de microfibras ligeramente húmedo en alcohol. No emplee lija o estropajo como sí se hace con los electrodos de cobre, porque estos métodos de limpieza pueden rayar la capa conductora de oro.

Resultados

Tras el primer tratamiento se puede apreciar una notable diferencia, aunque los beneficios de las microcorrientes son acumulativos y, por tanto, los tratamientos se realizan en una serie de sesiones para obtener los máximos resultados. Las sesiones suelen durar, aproximadamente, una media de 20 minutos según el programa.

Si se desea tratar una dolencia en concreto, se recomienda el uso continuado del Zapper.MX, al menos una vez al día (no más de dos), durante cinco o seis días seguidos. A continuación podrán espaciarse las sesiones a días alternos y, a partir de ahí según la sensación y feedback del paciente, se continuará o discontinuará el tratamiento.

La cantidad y la frecuencia de las sesiones dependen de la condición del paciente.

En pacientes con patologías crónicas, los resultados positivos, generalmente, se inician a partir de la sexta sesión de tratamiento.

Es importante la preparación de la piel antes del tratamiento mediante la limpieza utilizando solamente productos basados en agua, ya que productos basados en aceites impedirán el paso correcto de las frecuencias variables de microcorrientes.

Recomendaciones

Durante los periodos en que aplique el zapper, se recomienda una buena hidratación, iniciar al menos con un proceso de limpieza renal y consumir en las mañanas agua con jugo de limón y una pizca de sal entera, como la Sal de Cortés o similar, para enriquecer la conductividad a las biofrecuencias.

También se recomienda no consumir alimentos hasta al menos unas 2 horas después de despertar, y tampoco 2 horas antes de la hora de dormir. Ello para reactivar los procesos de AUTOFAGIA de nuestro organismo, que son procesos biológicos a través de los cuales nuestro cuerpo eliminará células muertas, dañadas y favorecerá así la acción de limpieza del zipper.

Otro aspecto que se debe considerar, sobre todo para aquellas personas que estén aplicando grupos de frecuencias relacionados con Diabetes, es que traten de dormir en una habitación oscura, que no entren luces fuertes del alumbrado público o de las casas vecinas al cuarto a través de las ventanas mientras dormimos. Es un descubrimiento relativamente reciente, que nuestros ojos envían señales hacia el cuerpo, no relacionadas con la visión, para activar procesos de fabricación de insulina. Esto es una adaptación de nuestro organismo para preparar al cuerpo de forma natural para las rutinas diarias al salir el sol, para aprovechar los carbohidratos almacenados y tener mejor desempeño durante el día. Pero con las luces artificiales durante la noche, los ojos envían dichas señales al cuerpo en el momento erróneo, para reactivar la producción de insulina, siendo ello muy dañino ya que en horas de sueño tener niveles altos de insulina conlleva a problemas serios de salud como la diabetes, somnolencia y una fuerte sensación de cansancio durante el día.

Los electrodos se pueden envolver con servitoallas de papel, una vuelta y media, y rociar con solución salina. No debe empapar en exceso las servitoallas, basta con rociar ligeramente para aumentar la conductividad eléctrica de los electrodos en contacto con la piel.

Seguridad

La terapia de microcorrientes se considera segura para personas de todas las edades. Aunque la intensidad de la corriente utilizada en los dispositivos de microcorrientes es muy baja, existen algunas posibles contraindicaciones a tener en cuenta. esto incluye:

- Personas con marcapasos. La función del Zapper.MX podría influir negativamente en la función del marcapasos y resultaría peligroso.
- Personas intolerantes a los campos electromagnéticos.
- Mujeres embarazadas, por prevención, ya que hasta ahora no se ha estudiado en detalle.
- Varios implantes metálicos coronarios.
- Epilepsia
- Flebitis
- Trombosis

Hasta la fecha no se ha informado de efectos secundarios significativos para este tipo de tratamiento, pero por razones de seguridad se advierte que los médicos y terapeutas son quienes deberían efectuar la terapia de microcorrientes.

Preguntas Frecuentes

¿Hay que tener en cuenta el color de los electrodos para sujetarlo con la mano derecha o izquierda?

Es un principio es indiferente la polaridad de los electrodos en una mano u otra, a diferencia de las magnetoterapias donde sí es importante la orientación de los polos. Por lo general recomendamos en la mano derecha el polo positivo (cable dorado), pero hay usuarios que nos escriben diciendo que lo usan al contrario consiguiendo igual buenos resultados. La creadora del Zapper, la Doctora Hulda Clark, no definió una polaridad en particular, siendo lo importante que las frecuencias circulen por el organismo.

¿Cómo hay que utilizar los electrodos?

Normalmente se usará en manos y pies, con excepción de dolores localizados en alguna parte concreta del cuerpo, en este último caso, se pondrán los electrodos, en la zona del dolor. Si el dolor está en la zona por debajo del ombligo, pueden ponerse los electrodos en los tobillos/planta de los pies. PRECAUCIÓN: si se pone en una zona que no sea manos o pies, ¡hay que tener en cuenta que la piel es más sensible! Por lo que puede producir enrojecimiento de la piel o quemaduras. Para evitarlo, hay que estar pendiente y si aparece escozor o sensación de quemazón retirar el aparato y colocarlo en otra zona. Para tratar dolores en zonas muy específicas, puedes poner un electrodo en una mano y el otro directamente sobre la zona afectada, por ejemplo: en su cadera, rodilla, espalda, etc. Depende de la experiencia de cada usuario, pero es frecuente notar un alivio casi inmediatamente. Lo importante es que haya buen contacto de los electrodos sobre la piel, para que las frecuencias recorran

todo el organismo, de esta forma, la electricidad llega a todos lados.

¿Cómo se pueden limpiar los electrodos?

Con papel servitoalla o paño de microfibra, ligeramente húmedo en alcohol, frotar ligeramente. Los electrodos de oro NO se deben limpiar con estropajo o papel de lija, como sí se hacía con los electrodos de cobre. El oro no se oxida, por lo que no es necesario lijarlo o limpiarlo con materiales abrasivos, solo ligeramente con un papel humedecido en alcohol para eliminar suciedad o grasa.

¿Cuántas veces hay que usarlo?

1a Semana: todos los días (hasta un máximo de 2 modos diarios)

2a Semana: 1 día sí, 1 día no.

3a Semana: 1 día a la semana.

Recomendamos usar los mismos modos varios días seguidos, para que puedas darle tiempo a ver cuáles son los que mejor le funcionan. Estas pautas, simplemente son una recomendación de uso, hay usuarios que nos escriben utilizando otras rutinas y consiguen efectos beneficiosos igualmente.

¿Cuánto tiempo se utiliza?

Habitualmente el uso práctico de un programa es de 1 a 2 veces al día. En casos agudos, como por ejemplo un proceso inflamatorio, se puede aplicar más veces si fuera necesario. Es importante mantener una rutina diaria durante los cinco primeros días; después, según se sienta la persona puede tratarse en días alternos conforme avance en el proceso de recuperación. Los tratamientos de frecuencias se deben realizar preferiblemente acostados y relajados lo máximo posible. La

duración a largo plazo no está limitada y se puede continuar su uso según el estado de bienestar de cada usuario. Se han llevado a cabo ensayos de seguridad donde los voluntarios han estado utilizando terapias zapper diariamente durante 6 horas consecutivas haciendo uso de multitud de programas sin ninguna incidencia negativa. Esto no significa que cuando más veces se aplica se obtiene un mejor resultado, sino que realmente es más eficaz una sola aplicación en un ambiente relajado y armónico que utilizar varios programas seguidos en un entorno frenético mientras el usuario está distraído haciendo otras actividades (como trabajar con el pc o hacer uso del teléfono móvil...) Por regla general, el tratamiento con frecuencias se da por finalizado en cuanto el usuario se encuentra recuperado para poder realizar sus tareas diarias sin inconvenientes. Si se eligen los programas adecuados y se utiliza correctamente, el tratamiento de frecuencias puede ofrecer resultados muy rápidos. Incluso se han reportado beneficios después de una sola aplicación. Sin embargo, normalmente suelen reportarse beneficios evidentes tras utilizarse durante un tiempo que varía de una a varias semanas.

¿Qué tratamientos o modos elegir?

Para elegir el tratamiento adecuado comenzamos primero con aquellos que coinciden con el diagnóstico emitido por el profesional médico. Se pueden utilizar diferentes programas para abarcar un espectro más amplio de frecuencias, ya que habitualmente hay síntomas que se parecen pero pueden tener diferentes causas, de esta manera se amplía el campo y aumenta la eficacia. En caso de no tener claro qué programa solicitar, empiece con los grupos generales. Hay que señalar que las frecuencias a veces se pueden solapar, es decir, que un mismo programa puede ser útil para

tratar diferentes dolencias, o también puede existir un diagnóstico erróneo y el programa indicado parece no funcionar. Sin embargo, en ocasiones sucede que al probar un programa que aparentemente no tiene relación con la dolencia diagnosticada, resulta que el usuario percibe la frecuencia de los electrodos muy intensamente, por encima de lo normal. Esto puede ser un indicador de haber acertado en el programa de tratamiento, y que el cuerpo esté reaccionando ante las frecuencias de dicho programa. (Aunque no siempre se tiene que sentir el paso de la corriente para garantizar que esté funcionando).

¿Cómo funciona?

De la misma manera que un cristal puede estallar a una frecuencia determinada, los parásitos, hongos, virus y bacterias tienen frecuencias de resonancia establecidas, que al ser atacados con dichas ondas, mueren y son eliminadas por nuestro sistema inmunológico. El Zapper.MX no cura, pero al matar el exceso de parásitos, ayuda y facilita al organismo a curarse por sí solo, sin necesidad de químicos o drogas que pueden afectar otros órganos. El Zapper.MX mata hongos, virus, bacterias y parásitos en el organismo por resonancia; pero además actúa incrementando la capacidad de defensa del sistema inmunológico, ya que polariza positivamente las membranas celulares, aumentando su potencial y mejorando así las defensas naturales del organismo. Como ya sabemos, además de materia somos también electricidad. Cada entidad tiene su propia frecuencia, y varía en función de si es una célula sana, un patógeno o una célula enferma. A grandes rasgos, el Zapper.MX trabaja liberando los electrones desde los electrodos, que viajan a través del cuerpo e inactivan los patógenos y toxinas que encuentran a su paso. Hablando de electricidad en tér-

minos generales, los parásitos y los tejidos enfermos tienen carga positiva (= escasez de electrones). El Zapper.MX introduce electrones, con carga negativa, a través de la piel hacia los tejidos vivos del cuerpo causando la muerte de los parásitos mediante la inversión de la polaridad.

También ayudan a sanar el tejido enfermo, ya que el tejido sano está cargado negativamente. Por eso, el Zapper.MX también resulta efectivo en el tratamiento del dolor. El dolor implica una acumulación de hidrógeno (iones positivos, H+) en la zona, que cursa con inflamación. La bioelectricidad provee de iones negativos (electrones) para contrarrestar los iones positivos del hidrógeno. Siempre que hay dolor, inflamación o enfermedad en una zona, los niveles de carga eléctrica son bajos. El Zapper.MX también restablece los niveles saludables de carga eléctrica de la célula: alrededor de 100 milivoltios (mV). Tengamos en cuenta que una célula envejecida tiene 50 mV de carga, y una célula cancerígena 15 mV. Por otro lado, los electrones que aporta la corriente eléctrica del Zapper.MX ayudan a aumentar la polaridad de la linfa, haciendo que fluya mejor por todo el cuerpo. Esto es importante porque la linfa circula mucho más despacio que la sangre, al no tener un órgano que la impulse como en el caso del corazón. Las células dependen del sistema linfático para recibir oxígeno y agua, así como para eliminar las sustancias de deshecho que producen. Las microcorrientes también recargan los niveles de energía a nivel intracelular incrementando la producción de ATP en las mitocondrias en un 500% y la absorción de proteínas de la célula entre un 40% y un 50%. Por eso, muchos pacientes han incrementado considerablemente sus niveles de energía.

FIN